



Productoverzicht
2013 - 2014

INHOUDSOPGAVE

NAGELVASTE PRODUCTEN

Douchezittingen	6
Wandbeugels Ergogrip	11
Vaste & opklapbare toiletbeugels	14
Badkameraccessoires	18
Diversen	21
Wastafelproducten	22
Doucheramens	23



VERRIJD BARE PRODUCTEN

Douchebrancards	23
Douche/toiletstoelen	25
Douchestoelen	28
Zwembadproducten	30
Toiletzittingen	31



NUTTIGE INFORMATIE

Technische specificaties	33
Bevestigingsadviezen	34



Ervaar het comfort van een veilige badkamer!

In dit Productoverzicht is het assortiment aan LinidoSolutions van Handicare opgenomen. Voor prijzen verwijzen wij u naar onze aparte prijslijst.

Bij onze productontwikkelingen staat het belang van de gebruiker centraal. Daarom houden we ons aan volgende basisprincipes:



Veiligheid wordt bereikt door te kiezen voor de juiste hulpmiddelen. LinidoSolutions biedt niet alleen de keuze, maar ook de garantie dat de producten sterk zijn en een hoge belastbaarheid hebben. U kunt dus vertrouwen op al onze sanitaire veiligheidsproducten.



Bruikbaarheid Onze producten worden uitvoerig getest op hun functionaliteit. In de ontwerpen gaan wij uit van de ondersteuning die de eindgebruiker nodig heeft. Hulp bij het opstaan vanaf het toilet en de gelegenheid bieden om zittend te douchen, zijn hier goede voorbeelden van.



Duurzaamheid In de badkamer worden producten aan extreme omstandigheden (vocht, kou, warmte) blootgesteld. Door chemische voorbehandeling, gebruik van epoxy coating, roestvast stalen en kunststof materialen wordt langdurig gebruiksgemak van onze producten gegarandeerd.



Ergonomie Bij LinidoSolutions spelen ergonomische aspecten zoals zithoogte, zitbreedte, zitdiepte, zithoek en armleggerhoogte een belangrijke rol binnen het ontwerp. Daarbij gaan wij uit van de afmetingen en natuurlijke bewegingen van het lichaam. Zo is bij onze wandbeugel Ergogrip de buis 60° gebogen in plaats van de traditionele 90°. Hierdoor nemen hand en pols een natuurlijke stand in bij het gebruik van de Ergogrip.



Vormgeving Wij besteden veel aandacht aan de vormgeving van onze producten. Waar mogelijk worden ronde vormen gebruikt: uit hygiënisch oogpunt, maar ook voor een moderne uitstraling. Bevestigingspunten worden aan het oog onttrokken en kleurkeuze zorgt ervoor dat een badkamer geheel naar eigen stijl en smaak kan worden ingericht.

Vindt u in dit productoverzicht niet de informatie die u zoekt? Neemt u dan contact op met onze afdeling verkoop. U vindt onze gegevens op de achterzijde van deze brochure.



LinidoSolutions van Handicare zijn hulpmiddelen en veiligheidsproducten voor bad, douche en toilet. Het uitgangspunt bij deze producten is het bieden van zoveel mogelijk zelfstandigheid en veiligheid bij gebruik van badkamer en toilet. Bovendien speelt het gemak voor een eventuele verzorger een grote rol. LinidoSolutions bieden vele toepassingsmogelijkheden en zijn geschikt voor gebruik thuis, in instellingen en in openbare gelegenheden. Deze producten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de vakhandel, waar u ook terecht kunt voor advies en informatie. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze afdeling verkoop, telefoonnummer +31 (0)15 – 369 54 40 of mail naar info.LS@handicare.com.

Onze website

Om op de hoogte te blijven van de LinidoSolutions, adviseren we u onze website www.handicare.com regelmatig te bezoeken. Op deze site vindt u de laatste productinformatie, nieuwsberichten, installatieadviezen en een overzicht van showroomadressen.

Via de site kunt u ook toegang aanvragen tot onze bestekservice. Hier vindt u hoge-resolutieafbeeldingen van onze producten, technische tekeningen, CAD-tekeningen en bestekteksten (neutraal en volgens STABU-norm).

Onze producten

Materiaal

Onze producten zijn vervaardigd uit:

- gecoat staal, of
- glasvezel versterkt kunststof, of
- gecoat rvs 304 (aanbevolen bij frequent gebruik in instellingen), of
- gepolijst rvs 304 (aanbevolen bij frequent gebruik in instellingen)
- gepolijst rvs 316 (aanbevolen bij gebruik in zwembaden)

Kleuren

De meeste LinidoSolutions kunnen worden geleverd in gepolijst roestvast staal en in de volgende kleuren:



Ral 9010
wit



Ral 9001
crème-wit



Ral 3003
rood



Ral 5002
blauw



Ral 9005
zwart




Gepolijst RVS met
witte afdekkappen



Gepolijst RVS met
zwarte afdekkappen

Bij stoelen, uitgevoerd in gepolijst roestvast staal, worden de armleggers standaard voorzien van een witte coating. Bij wandbeugels en opklapbare toiletbeugels, uitgevoerd in gepolijst roestvast staal, kan gekozen worden voor witte (standaard) of zwarte afdekkappen/muurplaten.

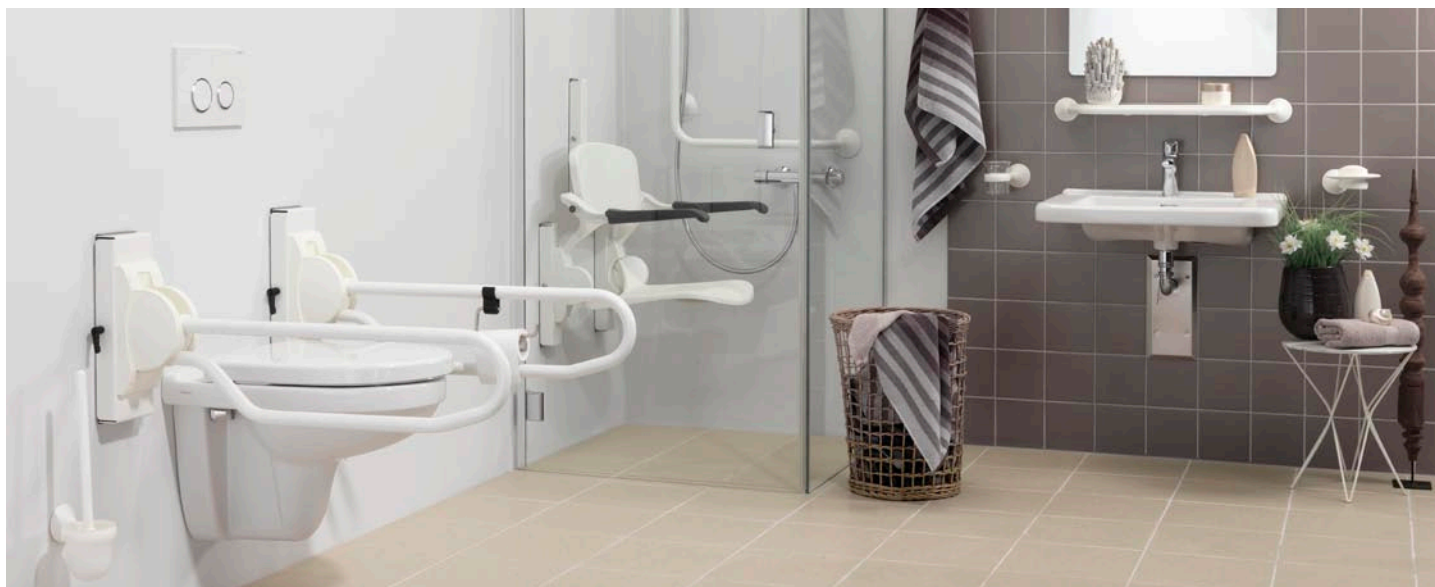



wandbeugel, zie pag. 10

douчекophouder, zie pag. 18

handdoekrek, zie pag. 19

douchezitting, zie pag. 6



opklapbare beugel, zie pag. 14

toiletborstelhouder, zie pag. 18




Douchezitting

LI2201.200

- kunststof zitting, opklapbaar
- zitbreedte 450 mm
- zitdiepte 405 mm
- inclusief boormal
- bevestigingsset leverbaar (LI2806.000)

△ Hulpvoetset LI2214.201 aanbevolen bij een gebruikersgewicht > 100 kg in verband met belasting van de muur.

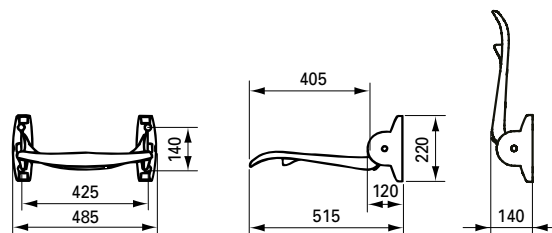


Douchezitting met rugleuning

LI2202.200

- kunststof zitting, opklapbaar
- kunststof rugleuning met rvs buis
- zitbreedte 450 mm
- zitdiepte 405 mm
- inclusief boormal
- bevestigingsset leverbaar (LI2805.000)

△ Hulpvoetset LI2214.201 aanbevolen bij een gebruikersgewicht > 100 kg in verband met belasting van de muur.

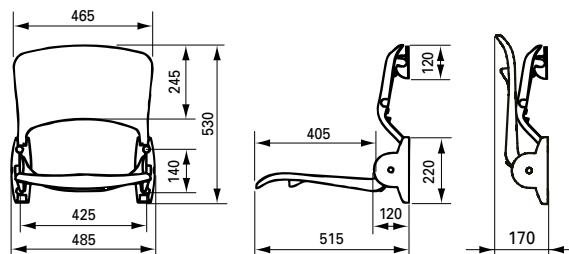


Douchezitting met rugleuning en armleggers

LI2203.200

- basis gelijk aan LI2202.200
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

△ Hulpvoetset LI2214.201 aanbevolen bij een gebruikersgewicht > 100 kg in verband met belasting van de muur.

△ Bij een gebruikersgewicht > 125 kg adviseren wij een douchezitting zonder armleggers (LI2202.200) toe te passen in combinatie met opklapbare toiletbeugels (LI2603.3xx) aan weerszijden.

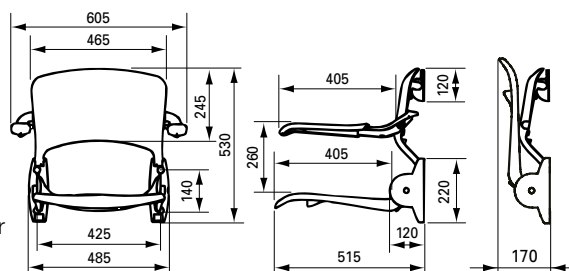


Hulpvoetset voor kunststof douchezittingen

LI2214.201

- past op LinidoSolutions douchezittingen LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200
- scharniert met de zitting mee
- bestaande uit dubbele hulpvoet en dubbele afstandhouder
- traploos in hoogte instelbaar voor aanpassing aan de gewenste zithoogte (van vloer tot bovenkant zitting: 420-570 mm)
- tevens achteraf te plaatsen

△ Aanbevolen bij een gebruikersgewicht > 100 kg in verband met belasting van de muur.

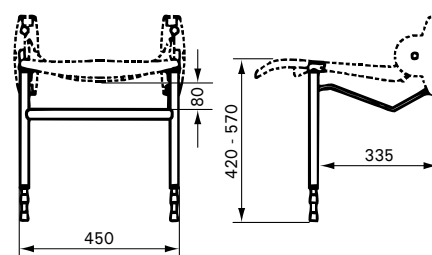

Douchezitting met verkorte zitdiepte

Uitsluitend in deze maatvoering
Hulppootset leverbaar: LI2214.002


LI2203.001

- zitting HT-bekleding, opklapbaar
- rugleuning HT-bekleding
- afzonderlijk opklapbare armleggers
- zitbreedte 450 mm
- zitdiepte 315 mm (muur tot voorzijde zitting 445 mm)

LI2201.001 (niet afgebeeld)

- als LI2203.001, zonder rugleuning en armleggers (muur tot voorzijde zitting 375 mm)

△ Hulppootset LI2214.002 aanbevolen bij een gebruikersgewicht > 100 kg in verband met belasting van de muur.

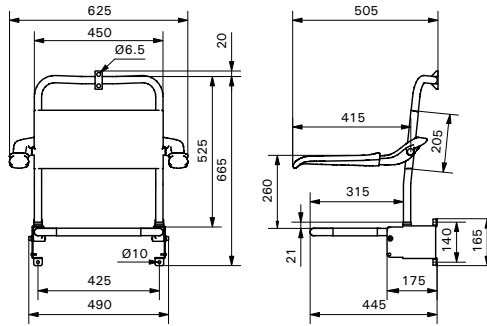

Douchezitting met zachte zitting

Hulppootset leverbaar: LI2214.001


LI2223.021

- opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde
- rugleuning HT-bekleding
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- geleiderails geschikt voor ondersteek Ø 300-315 mm

LI2221.021 (niet afgebeeld)

- als LI2223.021, zonder rugleuning en armleggers (muur tot voorzijde zitting 500 mm)

△ Hulppootset LI2214.001 aanbevolen bij een gebruikersgewicht > 100 kg in verband met belasting van de muur.


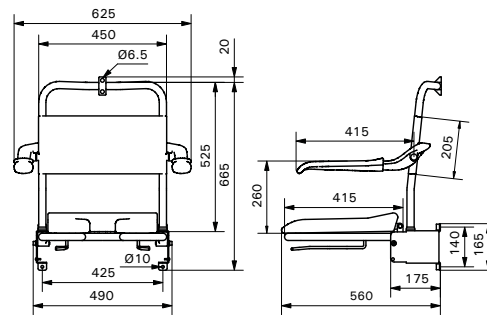


Hangend frame voor douchezitting

LI2216.001

△ kan uitsluitend aan wandbeugels Ergogrip LI2611.060, LI2611.070, LI2611.080 & LI2611.160 worden gehangen, aan horizontale hoekwandbeugel LI2611.015 en aan hoekwandbeugel voor twee muren LI2611.016.



- veilige vergrendeling d.m.v. kunststof borgpenen
- geschikt voor douchezitting LI2202.200 en LI2203.200
- afstand hart wandbeugel tot bovenzijde zitting: 475 mm
- frame van nvs buis
- eenvoudig, zonder gereedschap, op te hangen en te verwijderen
- Handicare adviseert bij een hangend frame het gebruik van hulppootset LI2214.201.

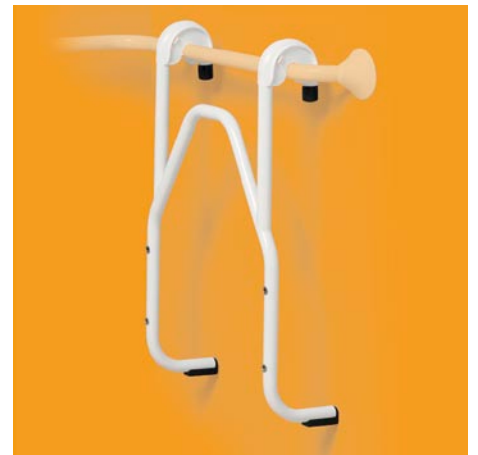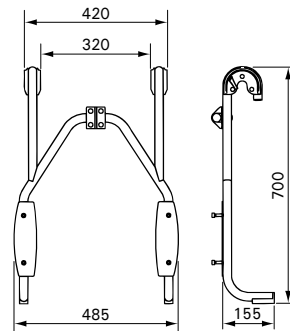

Hangend frame voor douchezitting, verstelbaar

LI2216.002

- als LI2216.001, maar met variabele zithoogte
- verstelbereik 100 mm
- afstand hart wandbeugel tot bovenzijde zitting: 400-500 mm
- Handicare adviseert bij een hangend frame het gebruik van hulppootset LI2214.201.

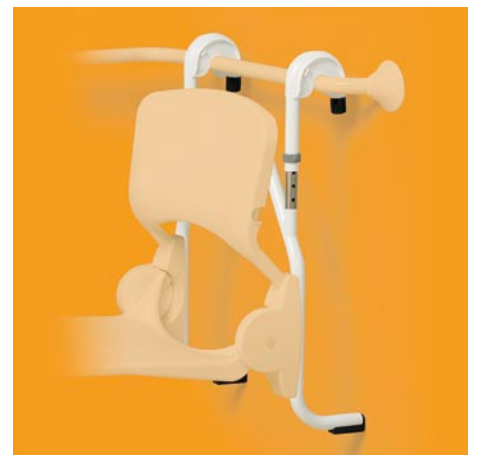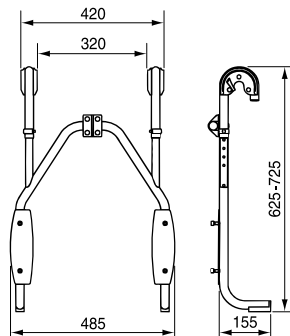


Het hangend frame voor een douchezitting is op de REHA CARE 2005 te Düsseldorf uitgeroepen tot winnaar in de 'Innovations competition' door het Research Institute for disabled aid technology (FTB).



Comforthoes t.b.v. kunststof douchezitting

LI09506.400


- zachte afneembare hoës, geschikt voor LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200
- zitbekleding speciaal voor de gevoelige huid of bij langdurig gebruik van douchezitting
- gemakkelijk te bevestigen en verwisselen d.m.v. klittenband aan onderzijde zitting
- polyethyleen/polypropyleenschuim
- uitsluitend leverbaar in de kleur blauw

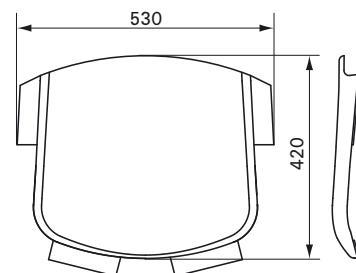

Hoogte verstelplaat

LI2215.101


- geschikt voor douchezitting zonder rugleuning LI2201.200, LI2201.001 & LI2221.021
- voor eenvoudige instelling van gewenste zithoogte
- laat plaatsing van douchezitting achteraf toe
- verstelbereik 150 mm
- inclusief boormal
- set verstelbare spangrepen leverbaar (LI2815.001)

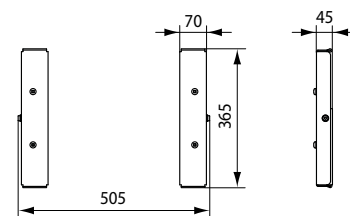

Hoogte verstelplaat

LI2215.102


- geschikt voor douchezittingen met rugleuning LI2202.200, LI2203.200, LI2203.001 & LI2223.021
- voor eenvoudige instelling van gewenste zithoogte
- laat plaatsing van douchezitting achteraf toe
- verstelbereik 150 mm
- inclusief boormal
- set verstelbare spangrepen leverbaar (LI2815.002)

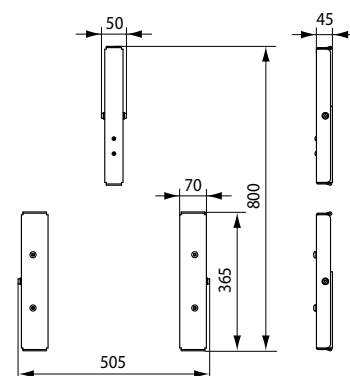

Set contraplatten

LI0122.508



- voor "door en door" bevestiging van LinidoSolutions douchezittingen
- voorzien van opgelaste moeren M8 en bijpassende draadeinden, sluitringen en moeren
- compleet met contraplaat voor rughaak douchezittingen
- contraplaat zichtbaar aan achterzijde wand
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit

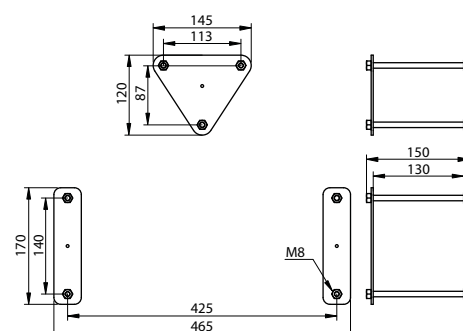



Douchezitting op vloerstatief

LI2244.000

- zitting opklapbaar
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- zitting en rugleuning HT-bekleding
- tevens leverbaar met een traploze hoogte-instelling (LI2254.000), min. zithoogte 400 mm max. zithoogte 570 mm

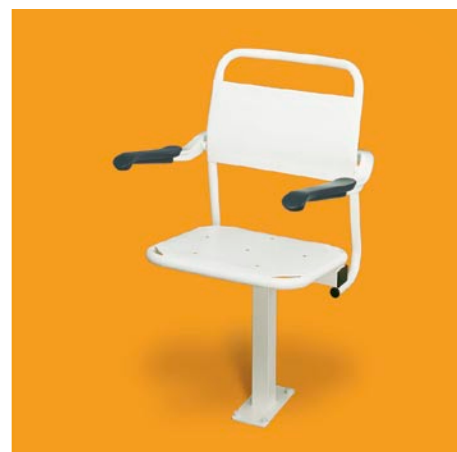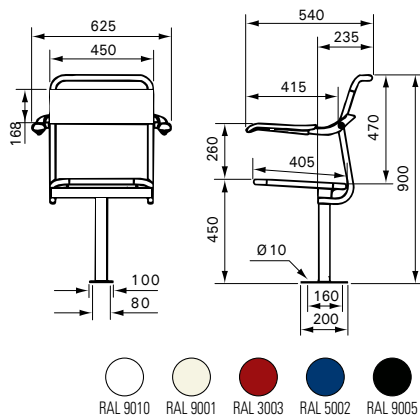



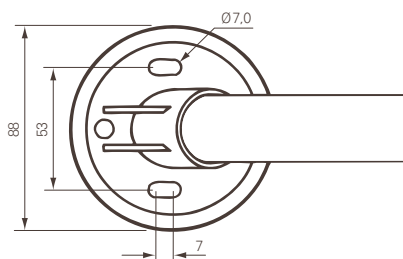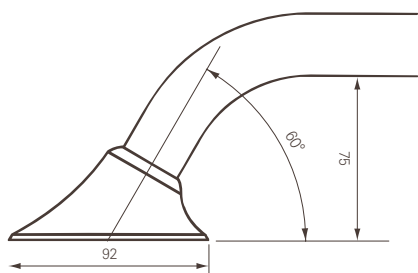



Alle wandbeugels Ergogrip worden uitgevoerd als stalen of rvs buis met kunststof flenzen en kunststof afdekkap. Doordat de buis 60° gebogen is in plaats van de traditionele 90°, nemen hand en pols bij het vasthouden van de Ergogrip een natuurlijke stand in. In combinatie met de afdekkap ontstaat hierdoor een afgeronde vorm, welke een vaste grip biedt.

Wandbeugel Ergogrip

Lengte = A B C

LI2611.020 180 200 275

- bevestigingsset leverbaar (LI2807.000)
- combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) bij twijfel over sterkte van de wand

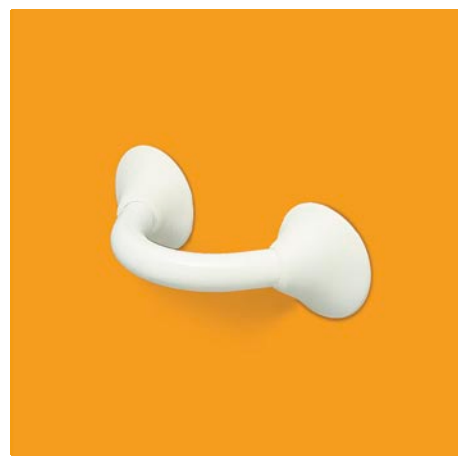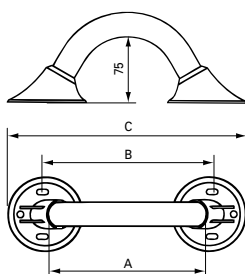

Wandbeugel Ergogrip

Lengte = A B C

LI2611.030 300 317 405

LI2611.040 400 417 505

LI2611.050 500 517 605

LI2611.060 600 617 705

LI2611.070 700 717 805

LI2611.080 800 817 905


LI2611.090 900 917 1005

LI2611.100 1000 1017 1105

LI2611.120 1200 1217 1305

LI2611.140 1400 1417 1505

- bevestigingsset leverbaar (LI2807.000)
- combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) bij twijfel over sterkte van de wand

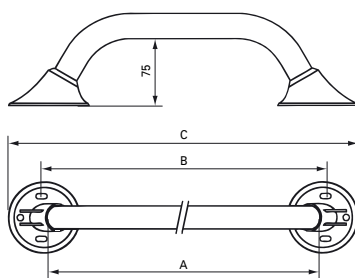

Wandbeugel Ergogrip (met extra muurflens)



Lengte = A B C


LI2611.160 1600 1617 1705

LI2611.180 1800 1817 1905

LI2611.200 2000 2017 2105

- bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt worden (2x bestellen wegens extra flens)
- combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) bij twijfel over sterkte van de wand

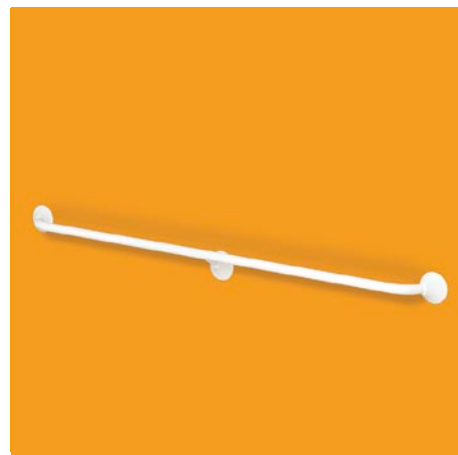
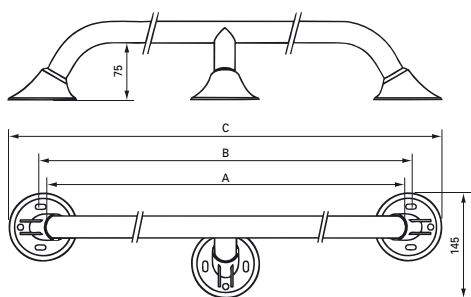


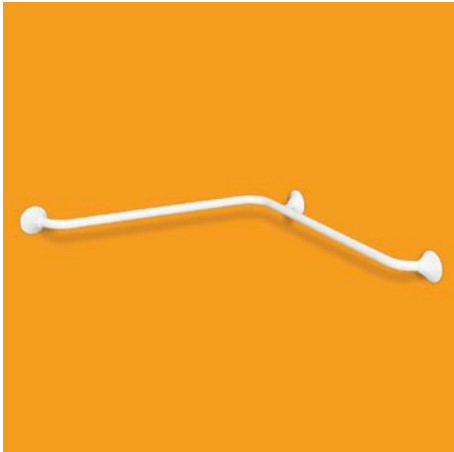

Horizontale hoekwandbeugel

LI2611.015



- voor twee muren
- bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt worden (2x bestellen wegens extra flens)
- combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) bij twijfel over sterkte van de wand

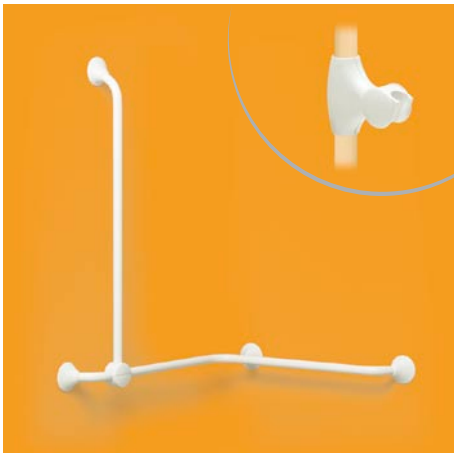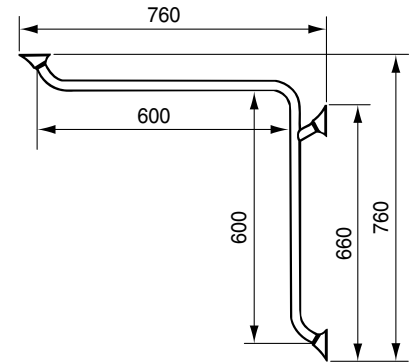

Hoekwandbeugel voor twee muren

LI2611.016



- het verticale deel kan op iedere gewenste positie geplaatst worden d.m.v. het verbindingblok
- gecombineerd met een douchekophouder (LI2630.200) vormt de verticale combibeugel tevens een stevige glijstang!
- kunststof verbindingblok uitsluitend leverbaar in de kleur wit
- bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt worden (2x bestellen wegens extra flens)
- combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) bij twijfel over sterkte van de wand

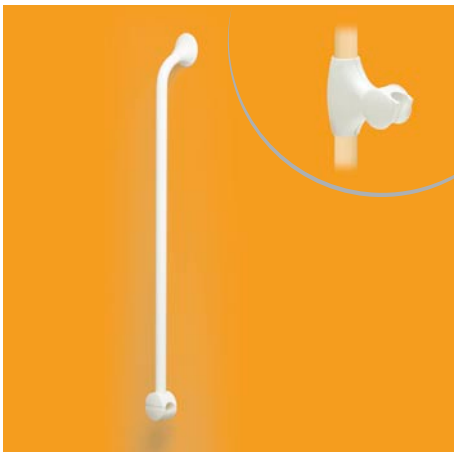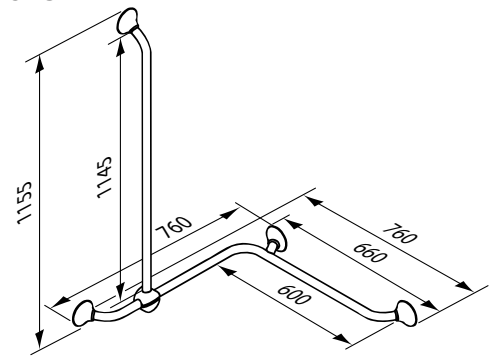

Verticale combi-beugel

LI2611.017

- te combineren met iedere wandbeugel Ergogrip, om zelf de ideale opstelling te kunnen bepalen
- gecombineerd met een douchekophouder (LI2630.200) vormt de verticale combibeugel tevens een stevige glijstang!
- kunststof verbindingblok uitsluitend leverbaar in de kleur wit
- bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt worden (2x bestellen wegens extra flens)
- combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) bij twijfel over sterkte van de wand

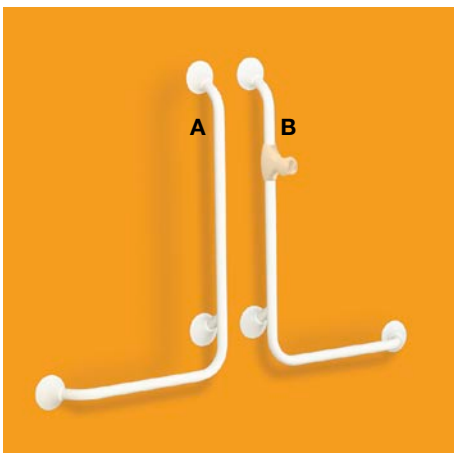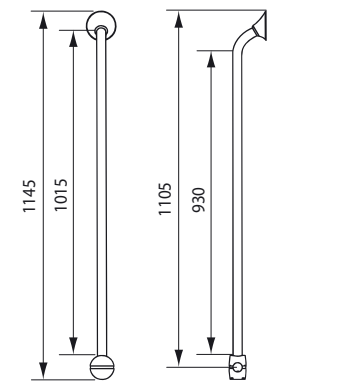


Wandbeugel 90 graden

A: LI2611.003

B: LI2611.004

- aanbevolen voor plaatsing bij bad en douche
- gecombineerd met een douchekophouder (LI2630.200) vormt deze wandbeugel tevens een stevige glijstang!
- bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt worden (2x bestellen wegens extra flens)
- combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) bij twijfel over sterkte van de wand


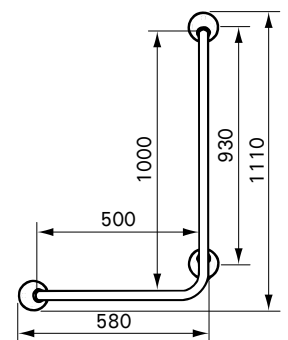


Wandbeugel 45 graden

A: LI2611.007

B: LI2611.008

- aanbevolen voor plaatsing bij toilet en bad

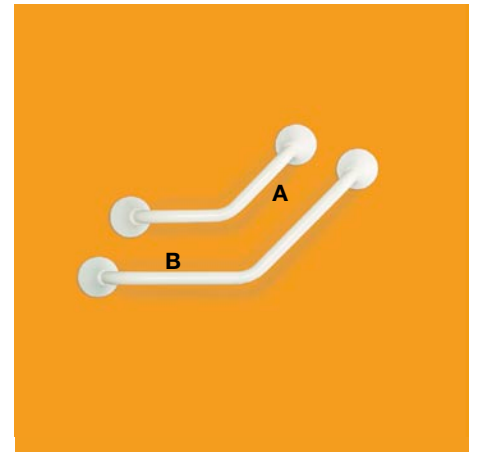
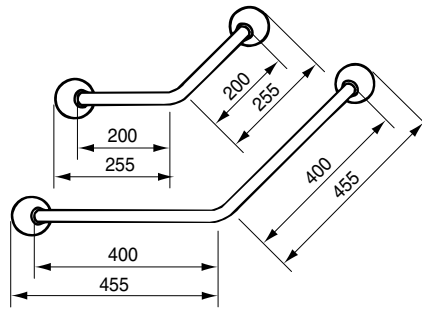


Trapspilbeugel

A: LI2611.011

B: LI2611.012


- voor trapspil of voor twee muren (buitenhoek)

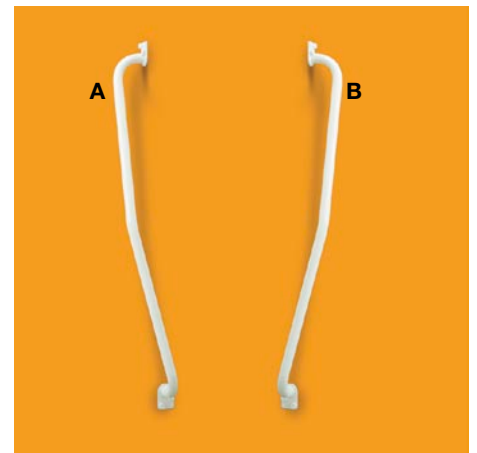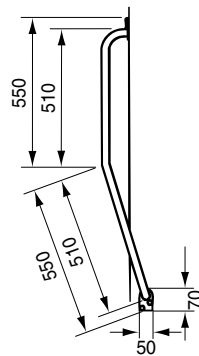

Kozijnbeugel

Lengte =	A	B	C	D
LI2619.030	300	280	240	215
LI2619.045	450	430	390	365
LI2619.060	600	580	540	515



- door de smalle flens uitermate geschikt voor bevestiging op kozijnen
- diameter buis: 22 mm
- uitsluitend leverbaar in aangegeven afmetingen
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit

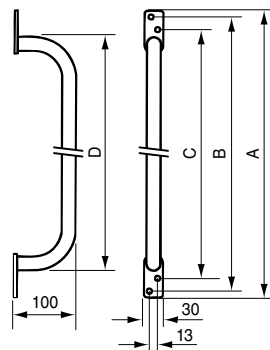

Contraplaat

LI0126.503


- voor "door-en-door" bevestiging van wandbeugel Ergogrip
- voorzien van opgelaste moeren M6 en bijpassende draadeinden, sluitringen en moeren
- contraplaat zichtbaar aan achterzijde wand
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit

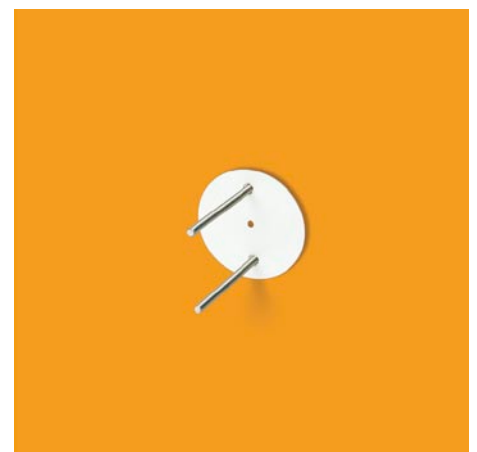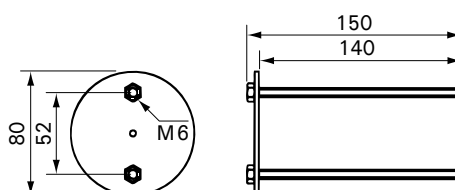




Vaste toiletbeugel

- LI2601.050** lengte 500 mm
- LI2601.060** lengte 600 mm
- LI2601.070** lengte 700 mm
- LI2601.080** lengte 800 mm
- LI2601.090** lengte 900 mm
- bevestigingsset leverbaar (LI2806.000)

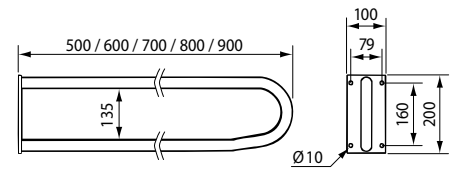


Opklapbare toiletbeugel

- LI2603.350** lengte 530 mm
- LI2603.360** lengte 600 mm
- LI2603.370** lengte 700 mm
- LI2603.380** lengte 800 mm
- LI2603.390** lengte 900 mm
- vergrendelt automatisch in verticale positie
- biedt steun in zowel horizontale als verticale positie
- kunststof muurplaat met buis van gecoat staal, gecoat rvs of gepolijst rvs
- bevestigingsset leverbaar (LI2806.000)

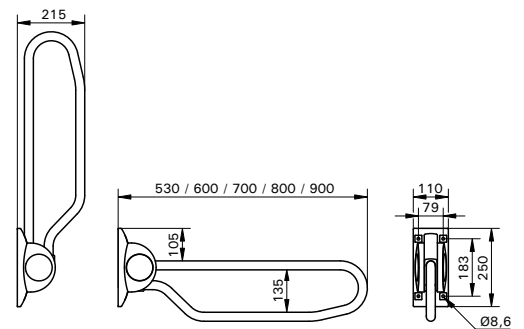


Vloerstatief voor opklapbare toiletbeugel

- LI2608.000**
- aanbevolen indien bevestiging van opklapbare toiletbeugel aan de muur niet mogelijk of niet wenselijk is
- inclusief achterplaat, aluminium klemmen en bouten voor montage van de opklapbare toiletbeugel
- eenmaal op het statief geplaatst is de opklapbare toiletbeugel traploos in hoogte instelbaar

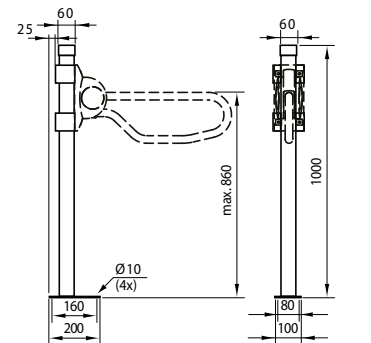

Voorsteun



- LI2609.200**
- toepasbaar als voorsteun of als fixatie in combinatie met twee vaste toiletbeugels (LI2601.0xx) of twee opklapbare toiletbeugels (LI2603.3xx)
- geschikt voor bestaande en nieuwe situaties
- in diepte verstelbaar, vergrendeling aan één zijde
- ergonomisch gevormd polyurethaanschuim, afwasbaar en bestand tegen uitzonderlijk gebruik
- eenvoudige montage

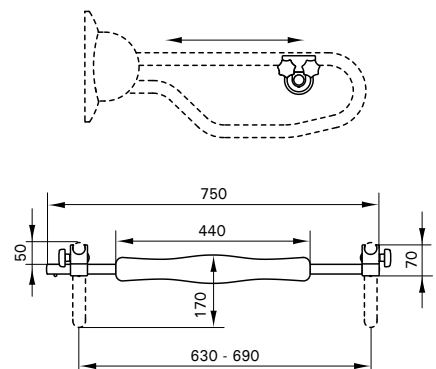

Polyurethaanschium armlegger

LI2610.001


- past op LinidoSolutions opklapbare toiletbeugel (LI2603.3xx) en vaste toiletbeugel (LI2601.0xx)
- inclusief lijmsset
- uitsluitend leverbaar in de kleur zwart

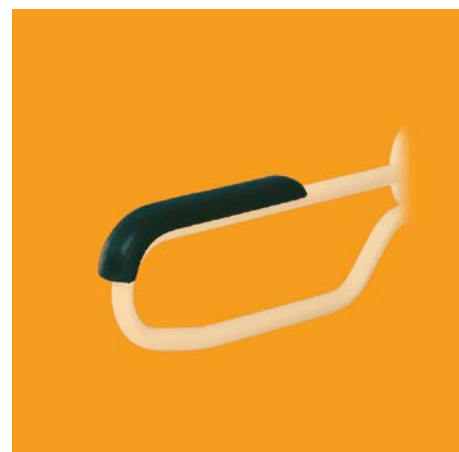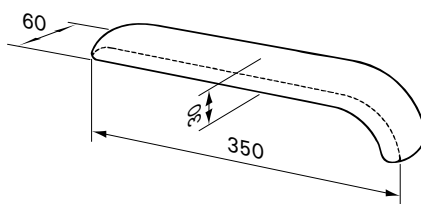

Hulpvoetset voor opklapbare toiletbeugel

LI2614.300


- aanbevolen indien er twijfel bestaat over de sterkte van de muur
- bestaande uit verstelbare hulpvoet, afstandhouder en klemblok
- traploos in hoogte instelbaar voor aanpassing aan de hoogte van de beugel (van vloer tot bovenkant bovenste buis 700 mm tot 850 mm)
- tevens achteraf te plaatsen op opklapbare beugels (LI2603.3xx)
- niet toepasbaar op LI2603.350
- kunststof verbindingblok uitsluitend leverbaar in de kleur wit

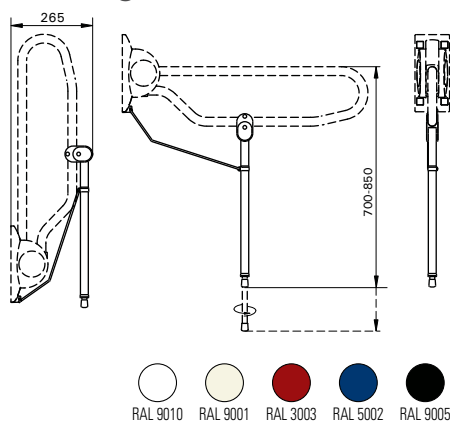

Hoogte verstelplaat voor opklapbare toiletbeugel

LI2615.300


- geschikt voor opklapbare toiletbeugels LI2603.3xx
- voor eenvoudige instelling van de gewenste steunhoogte
- laat plaatsing van opklapbare toiletbeugel achteraf toe
- verstelbereik 150 mm
- set verstelbare spangrepen leverbaar (LI2815.001)

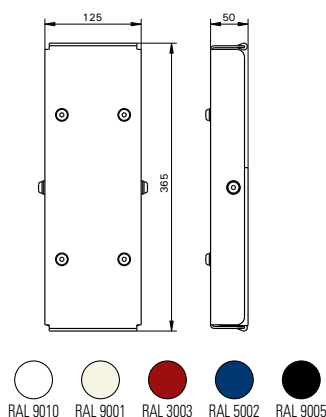

Contraplaat

LI0126.501

- voor "door-en-door" bevestiging van LinidoSolutions opklapbare toiletbeugel
- voorzien van opgelaste moeren M8 en bijpassende draadeinden, sluitringen en moeren
- contraplaat zichtbaar aan achterzijde wand
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit


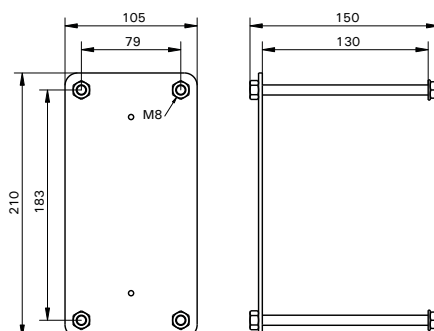




Toiletrolhouder

LI2617.000



- gepolijst rvs toiletrolhouder met zwarte, kunststof klem voor bevestiging aan LinidoSolutions opklapbare toiletbeugel (LI2603.3xx), vaste toiletbeugel (LI2601.0xx) of wandbeugel Ergogrip (LI2611.xxx)

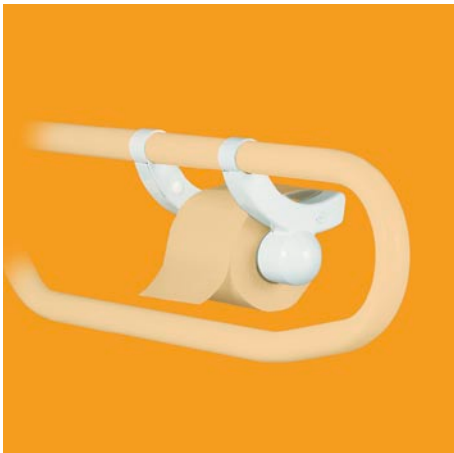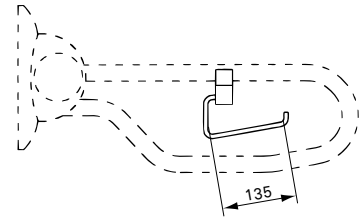

Eenhandig bedienbare toiletrolhouder

LI2618.000

- kunststof toiletrolhouder, waarbij eenhandig verwisselen, afrollen en afscheuren van toiletpapier mogelijk is
- past op elke LinidoSolutions opklapbare toiletbeugel (LI2603.3xx), vaste toiletbeugel (LI2601.0xx) of wandbeugel Ergogrip vanaf 40 cm (LI2611.xxx)
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit

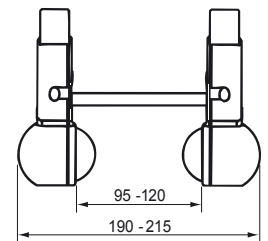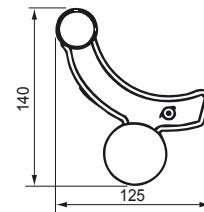


De Eenhandig bedienbare toiletrolhouder is winnaar van de Fireva Design Award 2002. Deze Award is een bekroning voor vernieuwende ontwerpen op het gebied van hulpmiddelen voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Daarnaast is de Eenhandig bedienbare toiletrolhouder genomineerd voor de VSK award 2004 in de categorie Sanitair.



Opties voor opklapbare toiletbeugel

- ingelaste nok voor beldrukker en openingen voor kabeldoorvoer (exclusief beldrukker en kabel)
- ingelaste toiletrolhouder
- afbeelding betreft uitsluitend een voorbeeld van de mogelijke opties
- opties zijn apart of in iedere gewenste combinatie mogelijk. (zie prijslijst voor voorwaarden)

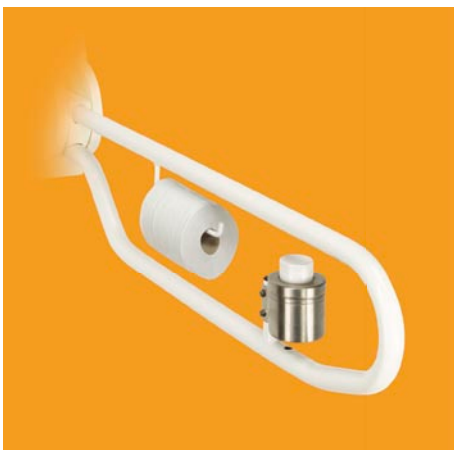

Opties voor opklapbare toiletbeugel

- ingelaste nok voor pneumatische bediening van de stortbak (exclusief pneumatische bediening)
- ingelaste toiletrolhouder
- afbeelding betreft uitsluitend een voorbeeld van de mogelijke opties
- opties zijn apart of in iedere gewenste combinatie mogelijk. (zie prijslijst voor voorwaarden)



douchekophouder, zie pag. 18

wandbeugel 90°, zie pag. 11

hoogteverstelplaten, zie pag. 8

dubbele wandhaak, zie pag. 19

tandenborstelhouder, zie pag. 18

douchezitting met rugleuning en armleggers, zie pag. 6






Douchekophouder

LI2630.200


- geheel kunststof
- past op elke wandbeugel Ergogrip vanaf 30 cm lengte, die daarmee een veilige glijstang vormt
- ook achteraf te plaatsen
- licht en eenvoudig verstelbaar over de gehele lengte
- ergonomische greep
- geschikt voor conisch gevormde huls van doucheslang

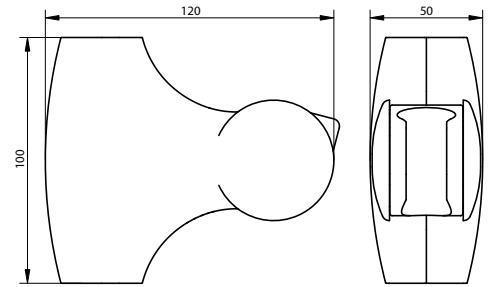

Toiletborstel in houder

LI2631.000


- geheel kunststof
- inclusief rvs bevestigingsmaterialen

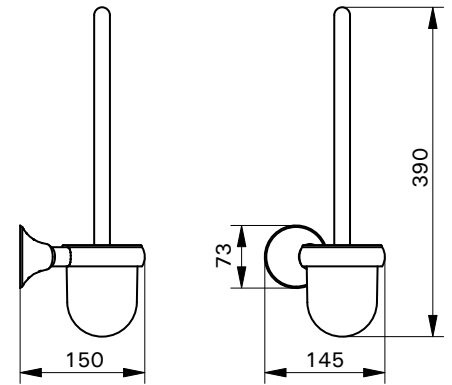

Tandenborstelhouder

LI2632.000


- geheel kunststof
- inclusief transparante beker
- inclusief rvs bevestigingsmaterialen

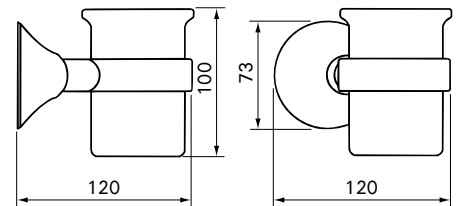

Zeepbakje

LI2633.000


- geheel kunststof
- inclusief rvs bevestigingsmaterialen

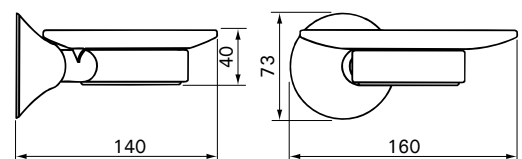

Planchet

LI2634.000


- kunststof planchet
- inclusief rvs bevestigingsmaterialen

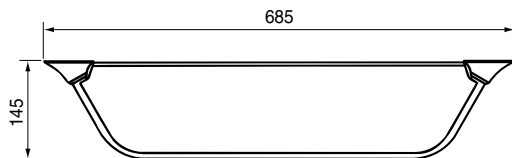

Toiletrolhouder

LI2635.000

- geheel kunststof
- tevens geschikt als reservetrolhouder
- inclusief rvs bevestigingsmaterialen


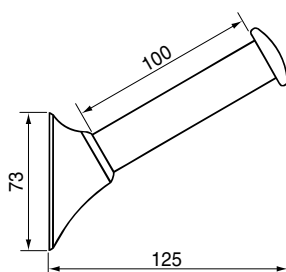


Wandhaken

LI2636.000 (enkel)

LI2636.001 (dubbel)

- geheel kunststof
- inclusief rvs bevestigingsmaterialen

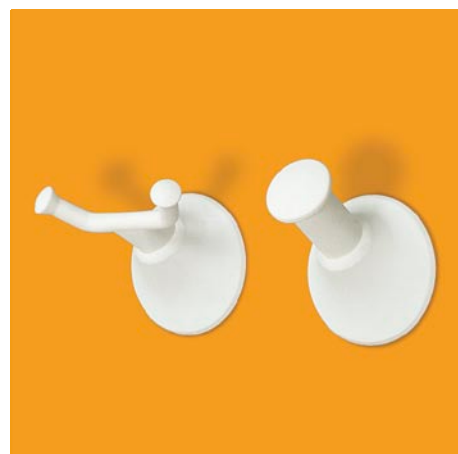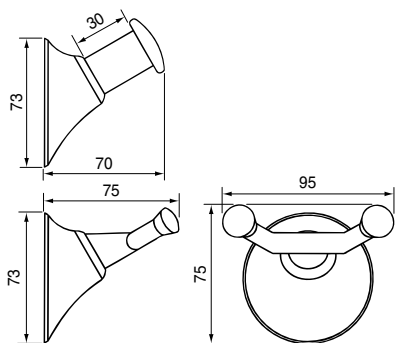


Handdoekrek

LI2637.001 (300 mm)

LI2637.002 (600 mm)

- combinatie handdoekrek en wandbeugel
- bovenste buis te gebruiken als wandbeugel Ergogrip

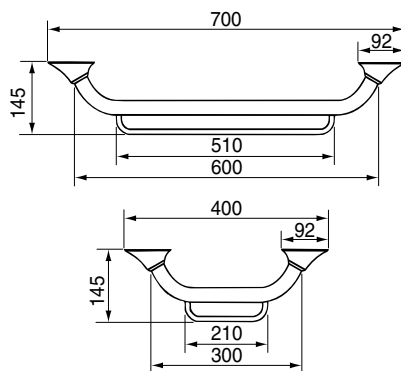




Douchegordijnrail 90 graden

LI2641.000


- voor hoekopstelling
- zonder gordijn en ringen

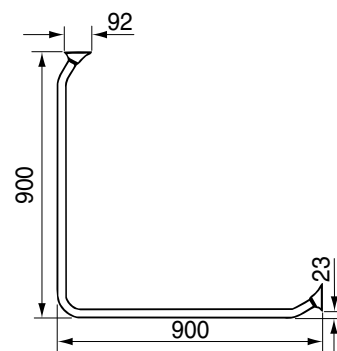

Plafondbevestiging voor douchegordijnrail

LI2641.100



- aanbevolen indien douchegordijnrail LI2641.000 groter is dan standaard
- kan tot de gewenste hoogte ingekort worden

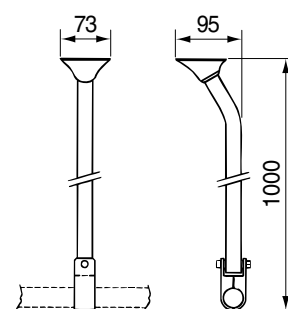

Garnituur voor kantelspiegel

LI2642.001


- tevens te gebruiken als steunpunt (2 wandbeugels)
- geschikt voor spiegel naar keuze
- wordt zonder spiegel geleverd
- adviesmaten voor spiegel:
 - dikte: max. 6 mm
 - ronde spiegel: max. Ø 60 cm
 - rechte spiegel: max. 60 x 40 cm

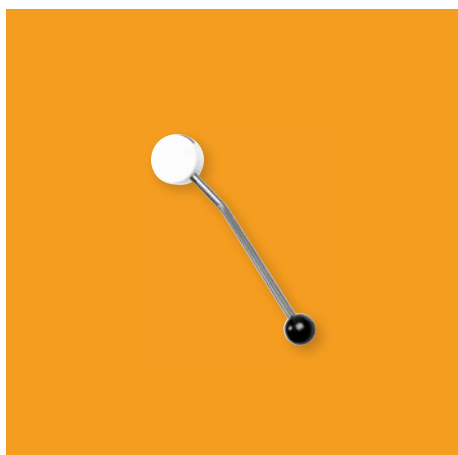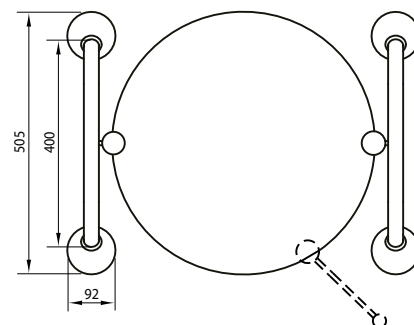

Bedieningshendel voor kantelspiegel

LI2642.002


- voor eenvoudige bediening van de kantelspiegel

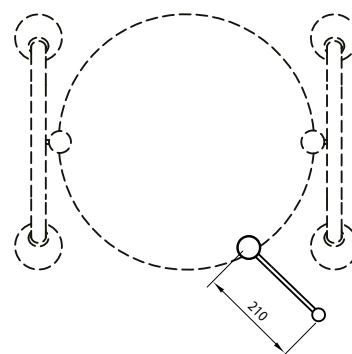

Wegzwenkbare papegaai

LI2613.000

- muurbevestiging
- kan door de gebruiker zelf bediend worden, ook vanuit een liggende positie
- koordlengte 1500 mm
- vergrendelbaar op 0, 45, 90, 135 en 180°
- met in lengte verstelbare nylon band en kunststof handgreep


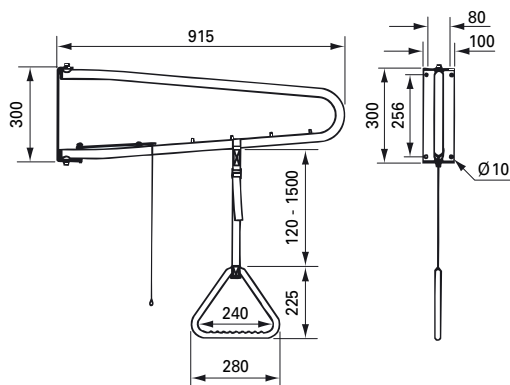


Rugleuning

LI2701.200

LI2703.200


- geschikt voor muurbevestiging achter toilet met hooghangend reservoir
- biedt de gebruiker de mogelijkheid achterover te leunen

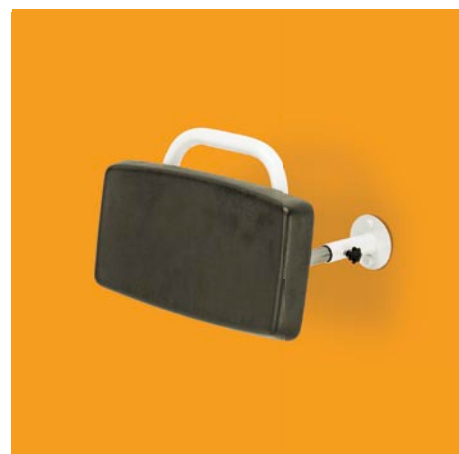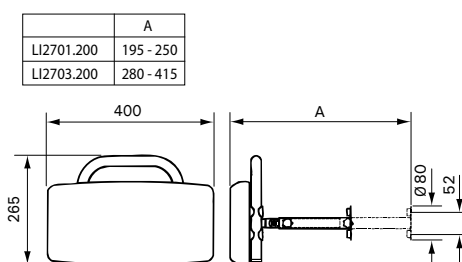


Rugleuning

LI2705.200

- rugleuning voor muurbevestiging achter toilet met inbouwreservoir
- biedt de gebruiker de mogelijkheid achterover te leunen

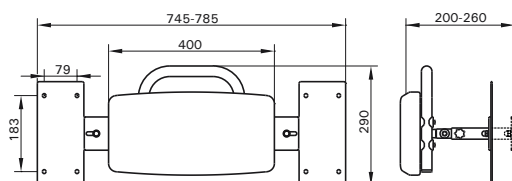


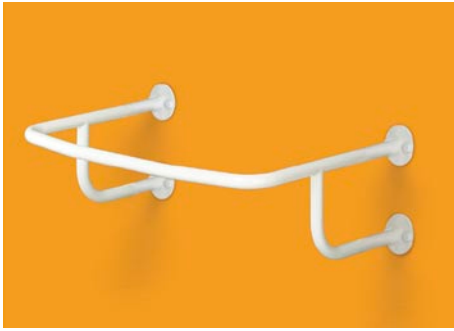

Wastafelbeugel

LI2606.000


- biedt steun rondom de wastafel
- afwijkende maten mogelijk
- afdekdopjes worden meegeleverd
- bevestigingsset wordt niet meegeleverd, is afhankelijk van de situatie

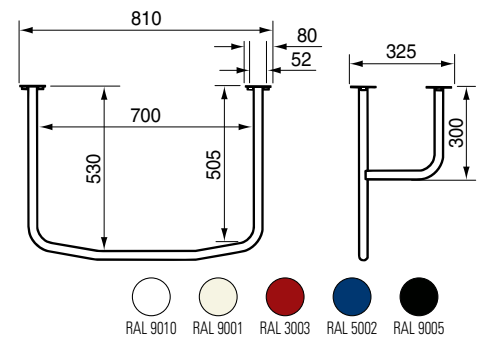

Module voor verstelling wastafel

LI3012.000

- traploos verstelbaar - in hoogte en diepte - d.m.v. gasveer
- verstelbereik: 250 mm hoogte en 86 mm diepte
- eenvoudige bevestiging op iedere gewenste hoogte
- geschikt voor alle standaard wastafels met vlakke achterzijde en een gewicht van 15 tot 18 kg
- eenvoudige handbediening d.m.v. hendel op bovenzijde
- wordt geleverd zonder wastafel, kraan en flexibele aan- en afvoer
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit

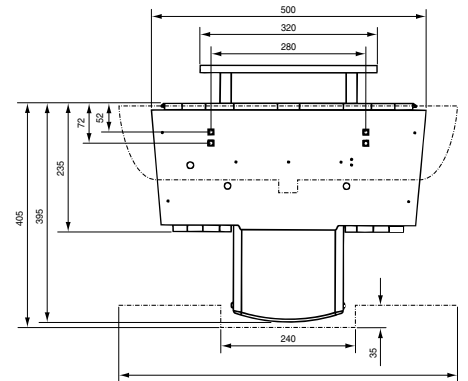

Flexibele aan- en afvoergarnituur

LI3013.000

- flexibele aan- en afvoergarnituur inclusief wastafelplug, geschikt voor afvoer \varnothing 40 mm, voor standaard wastafel en wastafelmodule LI3012.000
- flexibele afvoerslang 150 cm
- twee flexibele aanvoerslangen van 50 cm met rvs omvlechting en aansluiting 3/8" wartel en 10 mm knel
- sifon horizontaal of verticaal te monteren
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit




Doucheraam

LI2403.150, LI2403.170 en LI2403.190


- ligvlak HT-bekleding
- scharnierend aan de muur (opklapbaar en neerklapbaar)
- inklapbare poten
- incl. vastzetpal t.b.v. extra veiligheid als het raam opgeklapt is
- leverbaar met verstelbare rugsteun d.m.v. gasveer (LI2404.150, LI2404.170 en LI2404.190)
- leverbaar met pvc opvangbak en flexibele afvoerslang (LI2407.150, LI2407.170 en LI2407.190)
- leverbaar met verstelbare rugsteun d.m.v. gasveer (standaard aan linkerzijde) en met pvc opvangbak en flexibele afvoerslang (LI2408.150, LI2408.170 en LI2408.190)
- afwijkende maatvoering op aanvraag

	A	B
LI2403.150	1490	185
LI2403.170	1690	285
LI2403.190	1890	385

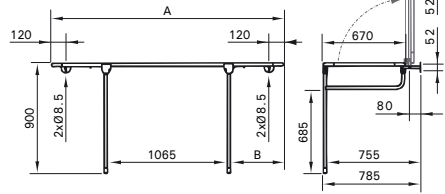

LI2403.xxx

	A	B	C
LI2404.150	1490	465	185
LI2404.170	1690	615	285
LI2404.190	1890	615	385

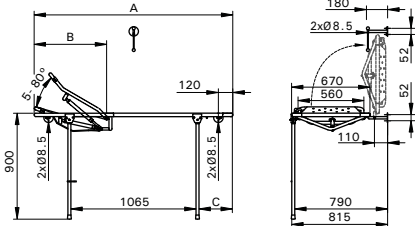

LI2404.xxx




Maattekeningen van LI2407 en LI2408 op aanvraag.

Deze zijn alleen opklapbaar.



In hoogte verstelbare douchebrancard

LI2514.150, LI2514.170 en LI2514.190

- ligvlak HT-bekleding
- vier rvs zwenkwieien Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare rugsteun d.m.v. gasveer
- pvc opvangbak met flexibele afvoerslang van 1000 mm
- in hoogte verstelbaar d.m.v. hydraulische pomp met linker- en rechter bediening
- twee neerklapbare zijhekken
- uitsluitend leverbaar in de aangegeven maten
- leverbaar zonder rugsteun (LI2513.150, LI2513.170 en LI2513.190)

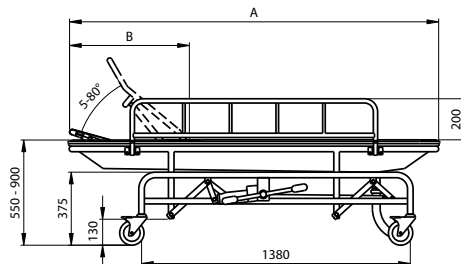


	A	B
LI2514.150	1505	465
LI2514.170	1705	615
LI2514.190	1905	615

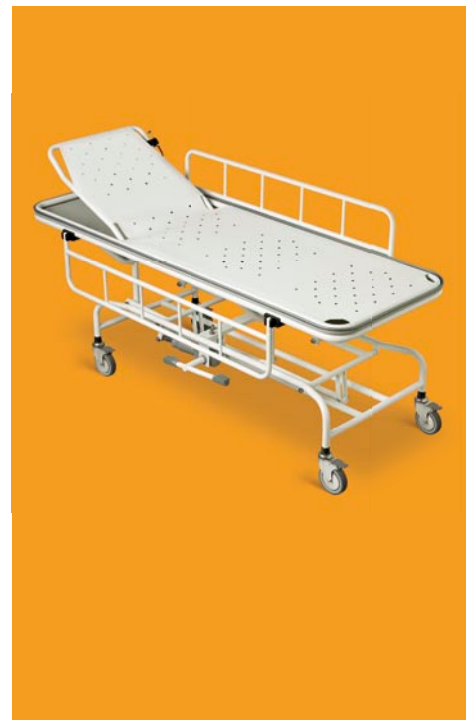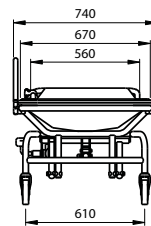

Insteekzijhek & Neerklapbaar zijhek



A: Insteekzijhek LI2490.125

- geschikt voor alle LinidoSolutions douchesamen en douchebrancards
- inclusief kunststof bevestigingsklemmen

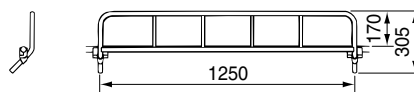

B: Neerklapbaar zijhek LI2590.125

- geschikt voor alle LinidoSolutions douchesamen en douchebrancards
- inclusief kunststof bevestigingsklemmen

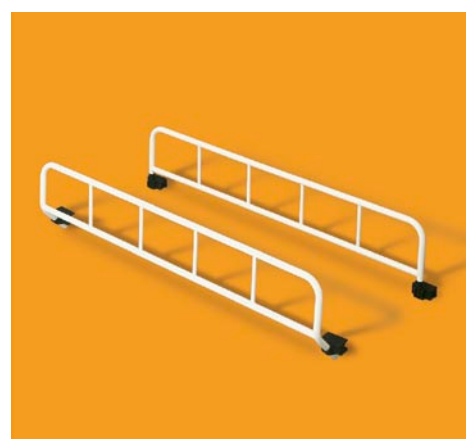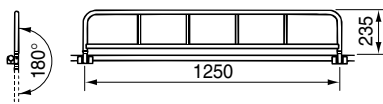



garnituur voor kantelspiegel, zie pag. 20

planchet, zie pag. 19

tandenborstelhouder, zie pag. 18

module verstelling wastafel, zie pag. 22

zeepbakje, zie pag. 18

flexibele aan-/afvoergarnituur, zie pag. 22

wandhaak, zie pag. 19

bedieningshendel voor kantelspiegel, zie pag. 20

opklapbare toiletbeugels, zie pag. 14

éénhandig bedienbare toiletrolhouder, zie pag. 16

comfort seat, zie pag. 31

douchetaboeret, zie pag. 28



Douche/toiletstoel 'Trento'

Per 1 januari 2013 is de Trento douche-/toiletstoel uit ons assortiment. De bijhorende accessoires zijn nog wel beschikbaar.

Accessoires douche/toiletstoel 'Trento'


LI09506.636 vulstop

- alleen geschikt voor douche/toiletstoel Trento
- polyurethaanschuim (grafiet)

LI0121.917 vervangingsset toiletzitting voor Trento, exclusief geleiderails, polyurethaanschuim (grafiet)

LI0121.918 vervangingsset rugleuning voor Trento, polyurethaanschuim (grafiet)

LI0121.919 vervangingsset geleiderails voor Trento, rvs gecoat

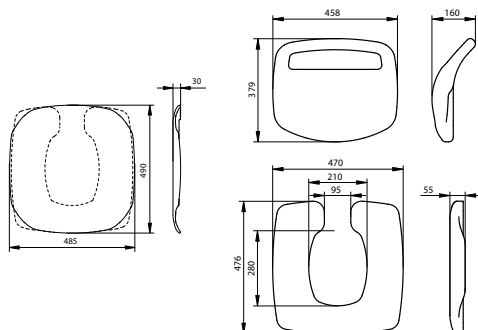

Ondersteek & toiletemmer

Ondersteek LI02979.411

- roestvaststaal, Ø 300 mm
- met deksel en handgreep

Toiletemmer LI02979.430

- roestvaststaal, Ø 300 mm
- met deksel en hengsel






Kantelbare douche/toiletstoel

LI2150.021


- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- rugleuning HT-bekleding
- verstelbare, wegzwenkbare en afneembare rvs voetsteunen
- opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde
- verwijderbare geleiderails geschikt voor ondersteek Ø 300-315 mm
- kanteling traploos d.m.v. gasveer max. 30°
- in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun
- voorzien van lumbaalsteun en kuitband
- overrijdbaar bij toilet (max. hoogte 450 mm)

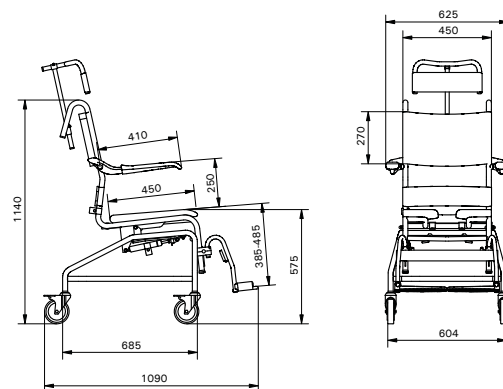

Hoogte verstelbare, kantelbare douche/toiletstoel

LI2161.321

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- rugleuning HT-bekleding
- verstelbare, wegzwenkbare en afneembare rvs voetsteunen
- afneembare en omkeerbare zachte toiletzitting: hygiëne-uitsparing naar keuze aan voor- of achterzijde, vulstop LI09506.636 apart te bestellen
- verwijderbare geleiderails geschikt voor toiletemmer Ø 300-315 mm
- elektrische bediening voor verstelling in zithoogte van 580 - 1040 mm
- elektrische bediening voor traploze kanteling, max 35°
- inclusief lumbaalsteun, verwijderbare heupgordel en verwijderbare kuitband
- in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun
- overrijdbaar bij het toilet

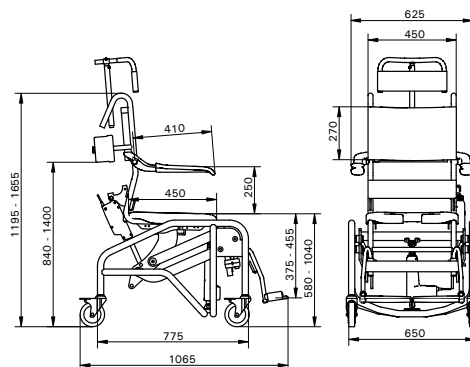

LI2161.121


- als LI2161.321 maar met hydraulische hoogteverstelling en een kanteling met gasveer



Verrijdbare douche/toiletstoel, heavy duty

LI2137.521 zithoogte (incl. zitting) 610 mm

- frame: breedte 600 mm, diepte 500 mm
- extra frameversterking
- maximaal gebruikersgewicht: 300 kg
- afzonderlijk neerklapbare armleggers met automatische blokkering
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde
- geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm
- vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare en opklapbare doorlopende voetsteun


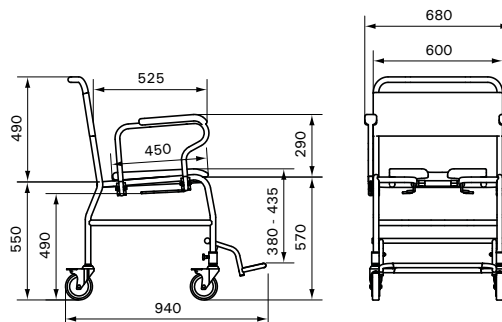


Douche/toiletstoel

LI2135.011 zithoogte (incl. zitting) 610 mm

LI2135.111 zithoogte (incl. zitting) 530 mm

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting met gesloten voorzijde
- geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm
- tevens leverbaar met zitting met open voorzijde (LI2135.021 en LI2135.121)
- tevens leverbaar met zwenkwielen (LI2136.011, LI2136.111, LI2136.021 en LI2136.121)

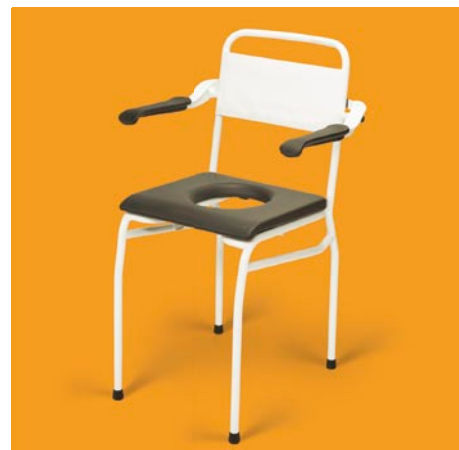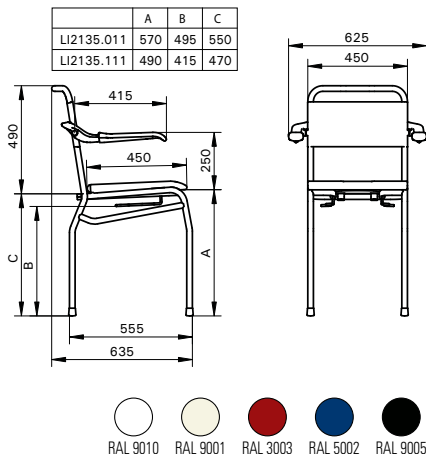


Verrijdbare douche/toiletstoel

LI2137.021 zithoogte (incl. zitting) 610 mm

LI2137.121 zithoogte (incl. zitting) 530 mm

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde
- geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm
- vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare en opklapbare voetsteunen
- tevens leverbaar met zitting met gesloten voorzijde (LI2137.011 en LI2137.111)

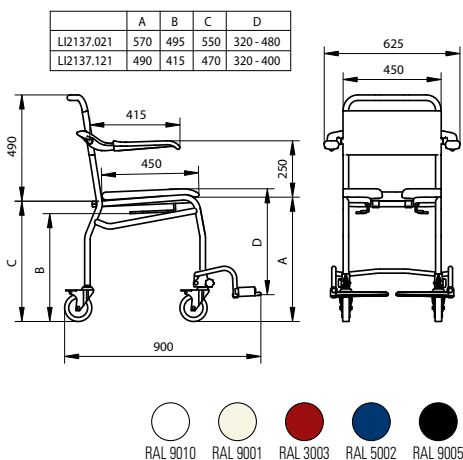


Douche/toiletstoel (zelfrijder)

LI2138.021 zithoogte (incl. zitting) 610 mm

LI2138.121 zithoogte (incl. zitting) 530 mm

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting open voorzijde
- afstand muur tot hart toiletopening: 545 mm
- geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm
- rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem en kunststof 24" wielen met rem en hoepel
- verstelbare en opklapbare voetsteunen
- tevens leverbaar met zitting met gesloten voorzijde (LI2138.011 en LI2138.111)

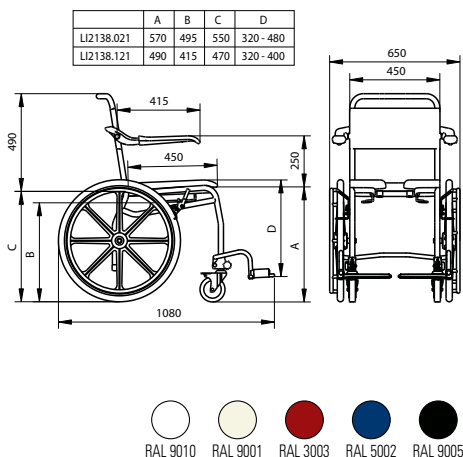


Zachte toiletstoelzittingen

LI0121.904 zachte toiletzitting met open voorzijde

LI0121.905 zachte toiletzitting met gesloten voorzijde

- geschikt voor LinidoSolutions douche/toiletstoelen LI2135.011 t/m 2138.121, LI2150.021, LI2161.021 en LI2161.221
- polyurethaanschuim (grafiet)

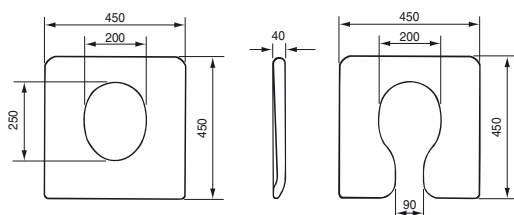

LI09506.306

vulstop t.b.v. zachte toiletzitting


- alleen geschikt voor bovenstaande zachte toiletzittingen
- polyurethaanschuim (grafiet)



Douchetaboeret

LI2002.000



- verwijderbare polyurethaan zitting met geïntegreerde afwatering
- doorlopende, vaste armsteunen
- hoogteverstelbaar in 8 stappen zonder gereedschap
- zithoogte 415 - 585 mm
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze zitting

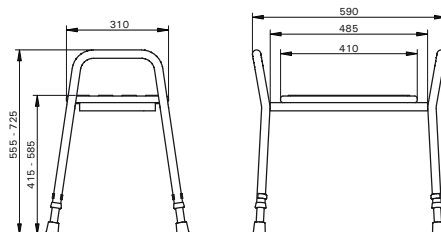

Rugleuning voor douchetaboeret

LI2002.001

- losse rugleuning voor douchetaboeret LI2002.000, zonder gereedschap te bevestigen
- zachte polyurethaan rugleuning
- met geïntegreerd handvat
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze rugleuning

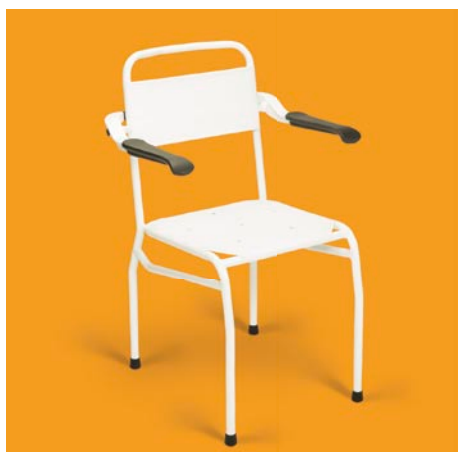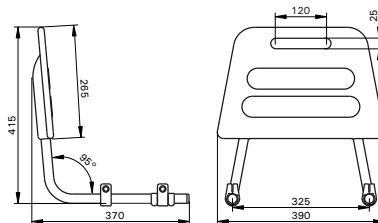


Douchestoel

LI2139.000 zithoogte 540 mm

LI2139.100 zithoogte 490 mm

- zitting en rugleuning HT-bekleding
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- tevens leverbaar met zwenkwielen (LI2140.000 en LI2140.100)

	A	B
LI2139.000	540	520
LI2139.100	490	470

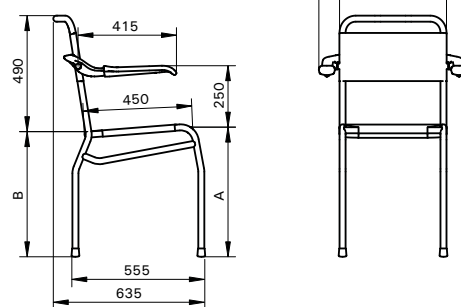


Verrijdbare douchestoel

LI2141.000 zithoogte 540 mm

LI2141.100 zithoogte 490 mm

- zitting en rugleuning HT-bekleding
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare en opklapbare voetsteunen

	A	B	C
LI2141.000	540	520	280 - 410
LI2141.100	490	470	280 - 360

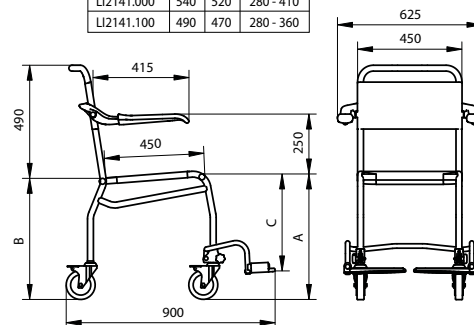


Douchestoel (zelfrijder)

LI2142.000 zithoogte 540 mm

LI2142.100 zithoogte 490 mm

- zitting en rugleuning HT-bekleding
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem en kunststof 24" wielen met rem en hoepel
- verstelbare en opklapbare voetsteunen

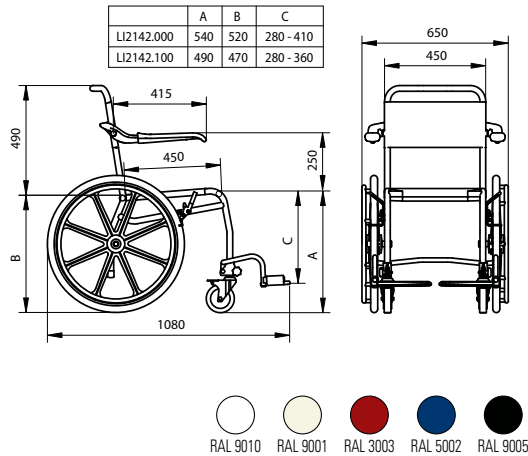

Opties voor douche- en douche/toiletstoelen

Centraal bedienbare rem

- op beide achterwielen
- zowel links- als rechtshandig te bedienen
- niet voor zelfrijder, LI2150.021 en LI2161.xxx

Opklapbare armleggers met voorsteun

- afzonderlijk opklapbaar
- niet achteraf te plaatsen; dient bij bestelling opgegeven te worden

Verstelbare, wegzwenkbare en afneembare voetsteunen

- geschikt voor alle LinidoSolutions douchestoelen en douche/toiletstoelen, behalve op LI2150.021 en LI2161.xxx






Zwembadstoel

LI2141.108 zithoogte 490 mm


- zitting en rugleuning HT-bekleding
- takelogen aan rugleuning en voorpoten
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- armleggers in aluminium, voorzien van een witte coating
- vier rvs zwenkwielen, Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare en opklapbare voetsteunen
- uitsluitend leverbaar in zithoogte 490 mm
- uitsluitend in rvs 316 gepolijst uitvoering leverbaar
- maatwerk niet mogelijk

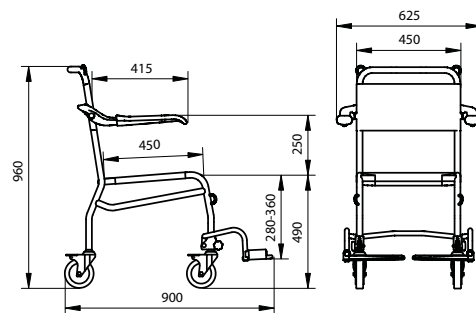

Zwembadstoel zelfrijder

LI2142.108 zithoogte 490 mm


- zitting en rugleuning HT-bekleding
- takelogen aan rugleuning en voorpoten
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- armleggers in aluminium, voorzien van een witte coating
- rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem en kunststof 24" wielen met rem en hoepel
- verstelbare en opklapbare voetsteunen
- uitsluitend leverbaar in zithoogte 490 mm
- uitsluitend in rvs 316 gepolijst uitvoering leverbaar
- maatwerk niet mogelijk

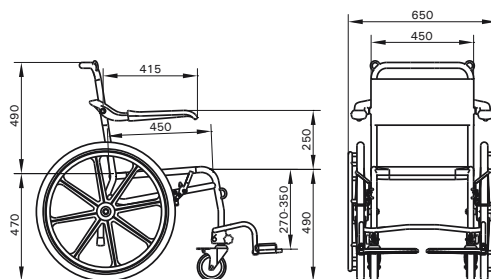

Zwembadbrancard

LI2514.198


- ligvlak HT-bekleding
- vier rvs zwenkwielen, Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare rugsteun d.m.v. gasveer
- in hoogte verstelbaar d.m.v. hydraulische pomp met linker- en rechterbediening
- twee neerklapbare zijhekken, welke aan het integraam gemonteerd zijn
- bovenframe is verwijderbaar van onderframe en voorzien van takelogen
- uitsluitend leverbaar in de aangegeven maten met als lengtemaat 1900 mm
- uitsluitend in rvs 316 gepolijst uitvoering leverbaar
- maatwerk niet mogelijk

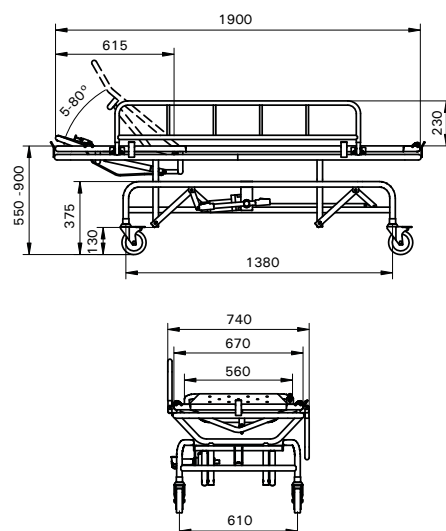

Comfort-seat

LI09506.316


- zachte toiletzitting voor mensen die langere tijd op het toilet moeten zitten en/of een gevoelige huid hebben
- twee soorten schuim onder een waterdichte afwerking
- inclusief rvs bevestigingsmaterialen
- uitsluitend leverbaar in de kleur grafiet

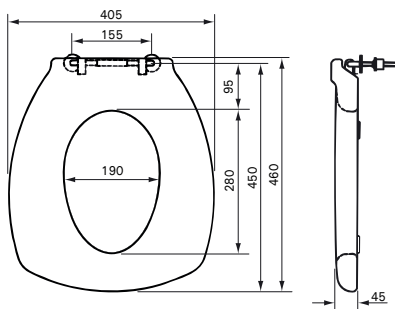

Zachte verhoogde toiletzitting

LI3030.002

- zachte toiletzitting voor mensen die langere tijd op het toilet moeten zitten en/of een gevoelige huid hebben
- verhoogt zithoogte met ca. 10 cm, wat het gaan zitten op en opstaan van het toilet vergemakkelijkt
- met hygiëne-uitsparing aan voorzijde
- hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- uitsluitend leverbaar in de kleur lichtgrijs

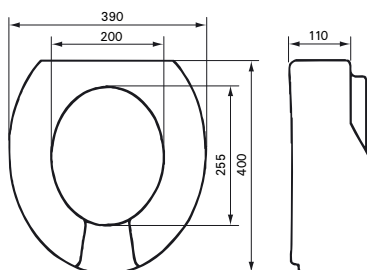

Toiletverhoger met deksel

10735

- verhoogt de zithoogte met 100 mm, wat het gaan zitten op en opstaan van het toilet vergemakkelijkt
- past op de meeste standaard toilet-potten
- eenvoudig te plaatsen zonder gereedschap
- uitsluitend leverbaar in afgebeelde kleur



Toiletverhoger met armleggers

10659

- verhoogt de zithoogte met 85, 125 of 165 mm
- onafhankelijk opklapbare armleggers, tevens verwijderbaar
- met deksel
- past op de meeste standaard toilet-potten
- eenvoudig te plaatsen zonder gereedschap

⚠ niet geschikt voor zijwaartse transfers.
Indien dit gewenst is, adviseren wij opklapbare toiletbeugels (LI2603.3xx) naast het toilet toe te passen.





Onderhoud

Producten die in douche of bad worden gebruikt: na gebruik met schoon water afspoelen. Voor alle producten geldt: reinigen met niet-agressieve schoonmaakmiddelen.

Garantie

De garantie op de Comforthoes (LI09506.400) en neopreen onderdelen is één jaar. Voor de toiletverhogers 10735 en 10659 geldt een garantietermijn van twee jaar. Voor alle overige producten is de garantie vijf jaar. De garantie geldt bij normaal gebruik van het product en bij gebruik in originele staat.

CE Alle veiligheidsproducten van LinidoSolutions voldoen aan de eisen van de NEN-EN12182 en aan de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Materiaalsoorten

- staal ST37.2, DIN 17100, Ø 28,6 x 1,5 mm
- staal ST37.2, DIN 17100, Ø 25,4 x 1,5 mm
- rvs AISI 304, Ø 28,0 x 1,5 mm
- rvs AISI 304, Ø 25,4 x 1,5 mm
- rvs AISI 316, Ø 25,0 x 1,5 mm
- kunststof douchezittingen: glasvezel versterkt nylon
- muurflenzen Ergogrip, bevestigingsmateriaal voor badkameraccessoires en muurplaat opklapbare beugels: glasvezel versterkt nylon
- kunststof badkameraccessoires: PMMA
- muurplaten van douchezittingen: rvs AISI 304

Bewegende en/of scharnierende onderdelen bestaan steeds uit kunststof en/of rvs.

Voorbehandeling voor coating

Staal wordt voor het coaten alkalisch ontvet, gebeitst, gefosfateerd en gepassiveerd.

Coating

Epoxypolyester, laagdikte 80-100 µm. Weerbestendig en slagvast (Buchholz hardheidstest volgens DIN 53153: > 80). Voldoet aan zoutneveltest volgens DIN 50021/ASTM B117 (1000 uur, < 1mm).

HT-bekleding (HT = Hygiëne en Transfer)

Geweven wit polyester doek met kunststof coating, volledig verlijmd rondom de buis. Slijtvast en eenvoudig te reinigen.

Isolatiesets

In verband met de vereiste elektrische isolatie worden producten voor wand- en vloerbevestiging, waarvan muurflenzen en muur- of vloerplaten niet in kunststof zijn uitgevoerd, geleverd met een witte kunststof isolatieset inclusief afdekdoppen.

Bevestigingsmaterialen

De producten van LinidoSolutions worden standaard zonder bevestigingsmaterialen geleverd, met uitzondering van badkameraccessoires. Keuze van bevestigingsmaterialen hangt af van de aard van de wand of van de vloer. Voor een duurzame, betrouwbare bevestiging adviseren wij u uitsluitend corrosiebestendige bevestigingsmaterialen toe te passen.

Belastbaarheid bij normaal gebruik**Douchetaboerets**

Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.

Douchestoelen en douche/toiletstoelen

Gebruikersgewicht: maximaal 200 kg.
Belasting per armlegger: maximaal 100 kg.

Vrijrijdbare douche/toiletstoel heavy-duty

Gebruikersgewicht: maximaal 300 kg.
Belasting per armlegger: maximaal 150 kg.

Kantelbare douche/toiletstoelen en in hoogte verstelbare/kantelbare douche/toiletstoelen

Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.
Belasting per armlegger: maximaal 75 kg.

Douchezittingen

Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.
Gebruikersgewicht bij toepassing hulppoot onder kunststof douchezitting of douchezitting met HT-bekleding: maximaal 300 kg.
Belasting per armlegger: maximaal 75 kg.

Doucheramens en douchebrancards

Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.

Vaste en opklapbare toiletbeugels

Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.
Zijwaartse belasting van de beugel: maximaal 100 kg.

Wandbeugels Ergogrip

Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.

Wegzwenkbare papegaai

Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.

Verhoogde toiletzittingen en toiletverhogers

Gebruikersgewicht: maximaal 130 kg.
Belasting armleggers: maximaal 60 kg per armlegger

Alle maten in deze brochure zijn aangegeven in mm. De tolerantie op deze maten bedraagt ± 5 mm.

Wijzigingen voorbehouden.

Voor vaste en opklapbare toiletbeugels, douchezittingen, vloerstatief, hoogte verstelplaten en wegzwenkbare papegaai.

Type wand	Advies	Schroeven
Ongeperforeerd/massief beton, natuursteen, baksteen, kalkzandsteen	Fischer Universeelplug UX 10 art. 77869	rvs schroeven 8 mm
Ongeperforeerd/massief gasbeton (Ytong, Durox), bimsteen, gipsblokken massieve drijfsteen	Injectiemortel + draadstang Evt. toe te passen materialen zijn: - FIS VS 150 C set art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer Draadstang M8	rvs draadstang M8
Geperforeerd/hol holle baksteen (Poriso), holle kalkzandsteen	Injectiemortel + injectiehuls + inschroefhuls Evt. toe te passen materialen zijn: - FIS VS 150 C set art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer Injectiehuls FIS HK 14x70K art.50436 - Fischer Inschroefhuls FIS E 8x85K art.58050	rvs schroeven 8 mm
Gipskarton, geperste houtvezelplaat, spaanplaat	Wand verstevigen met bijvoorbeeld multiplex	rvs houtschroeven 8 mm
Voorwandsysteem bv. Geberit, Wisa	Wand verstevigen met bijvoorbeeld watervast multiplex, dikte 32 mm	rvs houtschroeven 8 mm

Deze bevestigingsadviezen geven een indicatie van de mogelijkheden.

De bevestigingsmethoden en de lengtes van de schroeven dienen aan de hand van de aard van de wand bepaald te worden. Handicare is niet verantwoordelijk voor ondeskundige bevestiging van de producten en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Handicare heeft dit productoverzicht met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar productspecificaties en de assortimentssamenstelling kunnen tussentijds wijzigen. Handicare aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de in deze brochure vermelde gegevens.

Voor wandbeugels Ergogrip, doucheramens, wastafelbeugel, trapspilbeugel, kozijnbeugel en rugleuningen t.b.v. toilet.

Type wand	Advies	Schroeven
Ongeperforeerd/massief beton, natuursteen, baksteen, kalkzandsteen	Fischer Universeelplug UX 8 art. 77869	rvs schroeven 6 mm
Ongeperforeerd/massief gasbeton (Ytong, Durox), bimsteen, gipsblokken massieve drijfsteen	Injectiemortel + draadstang Evt. toe te passen materialen zijn: - FIS VS 150 C set, art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer Draadstang M6	rvs draadstang M6
Geperforeerd/hol holle baksteen (Poriso), holle kalkzandsteen	Injectiemortel + injectiehuls + inschroefhuls Evt. toe te passen materialen zijn: - FIS VS 150 C set art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer injectiehuls FIS HK 12x60K art.50432 - Fischer inschroefhuls FIS E 6x75K art.58049	rvs schroeven 6 mm
Gipskarton, geperste houtvezelplaat, spaanplaat	Wand verstevigen met bijvoorbeeld multiplex	rvs houtschroeven 6 mm
Voorwandsysteem bv. Geberit, Wisa	Wand verstevigen met bijvoorbeeld watervast multiplex, dikte 32 mm	rvs houtschroeven 6 mm

Deze bevestigingsadviezen geven een indicatie van de mogelijkheden.

De bevestigingsmethoden en de lengtes van de schroeven dienen aan de hand van de aard van de wand bepaald te worden. Handicare is niet verantwoordelijk voor ondeskundige bevestiging van de producten en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Handicare heeft dit productoverzicht met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar productspecificaties en de assortimentssamenstelling kunnen tussentijds wijzigen. Handicare aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de in deze brochure vermelde gegevens.



LinidoSolutions

HANDICARE

Weteringweg 5-9, 2641 KM Pijnacker

Postbus 70, 2640 AB Pijnacker

Nederland

T 015 369 54 40

F 015 369 71 64

info.LS@handicare.com

www.handicare.com

