



REHASENSE



BACKUP

DOUCHESTOEL

De Backup – in hoogte instelbare compacte lichtgewicht stapelbare aluminium douchestoel met vaste armleuningen en gepoedercoat frame.

BACKUP

DOUCHESTOEL



REHASENSE

HOOGTE INSTELBAAR

De zithoogte kan met behulp van de veerklemmen in 8 stappen van 2,5 cm ingesteld worden van 44 tot 64 cm. Dit maakt de Backup douchestoel eveneens geschikt voor lange personen.



Met een fijn-afstel voetje om de stoel stabiel neer te kunnen zetten.



Alle pootjes in hoogte instelbaar. Rubberen doppen op de voetjes verhinderen het glijden van de stoel op een gladde vloer.



UITVOERING

De structuur van het oppervlak van de afneembare polyurethaan zitting voorkomt uitglijden en bevordert het wegstromen van water met zeepresten. De polyurethaan delen zijn hol van binnen. Door even de warme douche op het materiaal te houden warmen deze onmiddellijk op tot een aangename temperatuur aan de huid. Een van de poten is met een fijn-afstelling uitgevoerd om de stoel overall stabiel te kunnen neerzetten.

RUGLEUNING

De **Backup** douchestoel kan met en zonder rug gebruikt worden. De demontabele en in diepte verstelbare rugleuning wordt in de doos meegeleverd. De rugleuning is in twee verschillende standen in te stellen met een zitdiepteverval van 1 cm en is zodanig ontworpen dat de onderrug ondersteund wordt waarbij het bovenlichaam veel vrijheid heeft om te bewegen.

DUURZAAM EN STERK


De **Backup** douchestoel voldoet aan de eisen van de EU Richtlijn 93/42 voor medische producten. De stoel is getest en toegelaten voor gebruikers met een gewicht tot 150 kg.

LEVERING

De **Backup** wordt inclusief rug geleverd met 4 stuks in één doos (minimum bestelhoeveelheid). De douchestoel is voor grotere webshop projecten ook leverbaar als bouw pakket. Deze worden per stuk in één doos geleverd inclusief rug. Deze versie heeft gevormde armleuningen en is niet stapelbaar.

KNOCK-DOWN FRAME

Gelast stapelbaar frame, 3 types zittingen. Per stuk leverbaar als bouw pakket inclusief rug. Deze versie heeft gevormde handgrepen. Dit frame is niet stapelbaar.

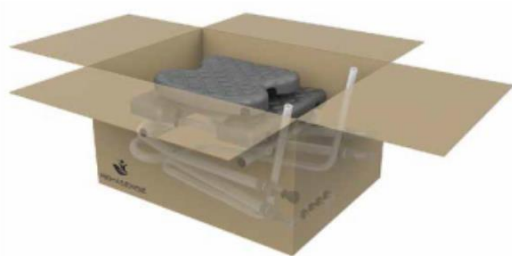

Kleinere verpakking voor het bouw pakket: 50 x 45 x 40 cm.



TECHNISCHE INFORMATIE

Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Kleuren:

Frame: wit, zilver

Zitting & rug: grijs, zwart

Voor persoonslengte: 130-210 cm

Breedte x lengte x hoogte:

Zonder rug

56 x 53 x 60-80 cm

Met rug

56 x 59-60 x 80-100 cm

Breedte tussen de armleuningen:

42 cm

Zithoogte:

44-64 cm (in stappen van 2,5 cm)

Gewicht totaal: 4,9 kg

(+ rug 1,4 kg)

Materiaal:

Corrosievrij gepoedercoat

aluminium frame. & PU

(polyurethaan) kunststofdelen